



Liberté Confort & Fiabilité

Liberté

Grâce au siège d'escalier Pinnacle, vous pourrez continuer à vivre dans la maison que vous aimez, avec le confort et la confiance de pouvoir accéder sans restrictions à tous les étages. Le siège d'escalier vous permet de réduire ou d'éliminer le risque de blessure et de douleur, ou l'usure des articulations, tout en vous déplaçant plus facilement d'un étage à l'autre.

Confort

Pinnacle est doté de fonctions supplémentaires, soit la commande d'appel/envoi à distance et la commande d'urgence manuelle. Alimenté par un système d'entraînement à piles à faible tension, il permet un déplacement stable, sécuritaire, sans vibration et en douceur.

Fiabilité

Le témoin lumineux se trouvant sur l'accoudoir permet d'identifier facilement et rapidement les situations qui nécessitent une intervention. Lorsque le témoin devient vert, cela signifie que le siège d'escalier peut être utilisé en toute sécurité ; jaune signifie qu'un obstacle se trouve dans l'escalier, ou que le siège doit pivoter à sa position adéquate avant tout déplacement. Les piles du siège d'escalier se rechargent automatiquement afin qu'elles soient entièrement rechargées et prêtes à l'usage. Un signal sonore retentit et un témoin lumineux de couleur jaune s'allume lorsque le siège d'escalier n'est pas stationné au bon endroit en haut ou en bas de l'escalier pour recharger les piles. Les commandes électroniques permettent le démarrage et l'arrêt en douceur du siège d'escalier. L'absence de mouvement brusque ou d'arrêt soudain ajoutent à la sensation de sécurité et de fiabilité.

Québec
2160, rue
De Celles
418-847-5225

Montréal
10 370, Louis-H
Lafontaine
514-493-9797


Brossard
2230, Boul.
Lapinière
450-462-4694

Sherbrooke
329, rue
King Est
819-566-5551

Shawinigan
1186, de la
Station
819-536-7075



Les sièges d'escalier Pinnacle procurent un déplacement en douceur et s'arrêtent automatiquement en haut de l'escalier. Le siège d'escalier démarre et arrête en douceur.

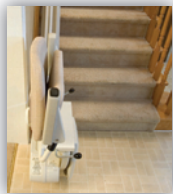

Le repose-pied, le siège et l'accoudoir se plient au maximum, ce qui permet à d'autres d'utiliser l'escalier en toute sécurité.



La commande manuelle permet de soulever ou d'abaisser le siège manuellement et sans effort.



Pour assurer la sécurité, le repose-pieds est doté de rebords avec capteur sur toutes les surfaces supérieures, inférieures et latérales.



Le siège pivote facilement. Il suffit d'appuyer sur le bras de levier permettant de s'asseoir et de se lever du siège d'escalier.



Le siège pivotant permet de s'asseoir et de se lever en toute sécurité en haut de l'escalier. La ceinture de sécurité, une caractéristique standard, assure la sécurité durant le déplacement.




La clé amovible empêche l'utilisation non autorisée, particulièrement les jeunes enfants.



Les capteurs de sécurité du chariot bloquent l'accès aux doigts et arrêtent immédiatement tout mouvement en cas d'obstruction.



La commande d'appel/envoi, manuelle ou fixée au mur, permet de déplacer le siège d'escalier à l'endroit désiré.

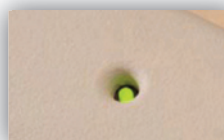

Déterminez le contrôle du mouvement du siège d'escalier; vous avez le choix entre la commande manuelle à bascule ou oscillante.